

FILTRO DE PARTÍCULAS EM LINHA GUARDIAN™




Elimine entupimentos indesejados e proteja seu nebulizador



Se houver partículas nas suas amostras, existe o risco de que elas fiquem presas nos canais finos da linha de amostra ou dentro do nebulizador. O Filtro em Linha Guardian oferece uma forma simples e eficaz de eliminar esse risco. Ele incorpora um filtro de 120 microns e pode ser facilmente inserido na tubulação da amostra entre a sonda do amostrador automático e o nebulizador.

Seu design, desenvolvido para resistir a entupimentos, é ideal para amostras de ICP. Qualquer acúmulo de partículas pode ser facilmente removido por retrolavagem e limpeza ultrassônica. Além disso, o material PEEK é adequado para uso com a maioria das soluções comuns de ICP.

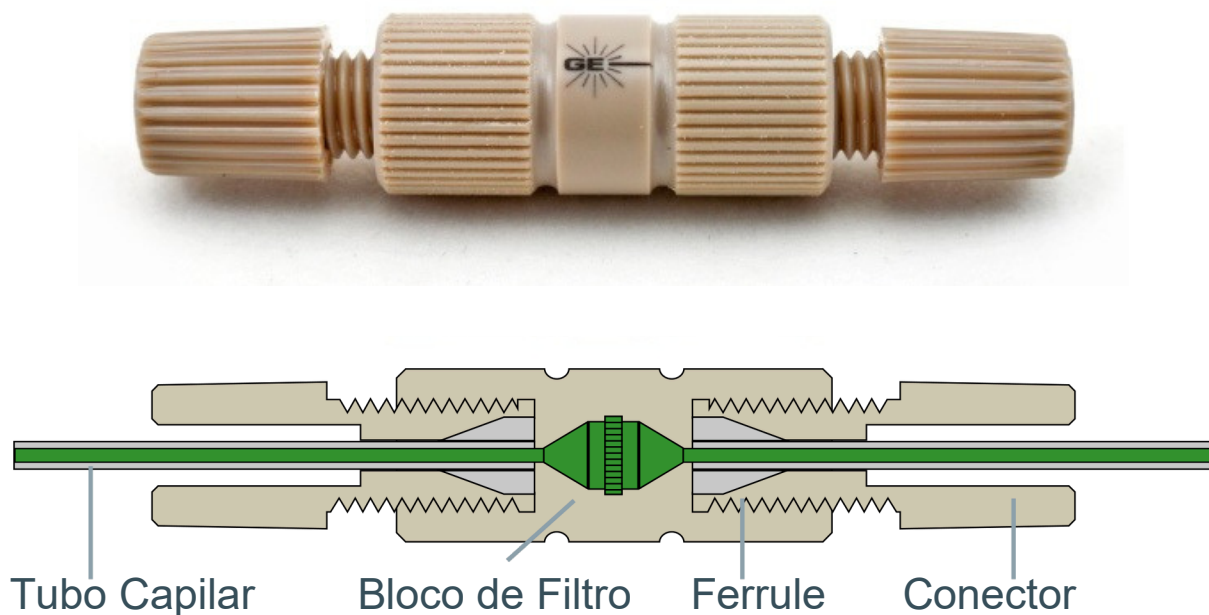

Para mais informações, visite: www.mixlab.com.br
Entre em contato: vendas@mixlab.com.br