

CÂMARA DE NEBULIZAÇÃO CICLÔNICA RESFRIADA POR PELTIER PARA ICP AGILENT®



A Glass Expansion conta com o Kit de Câmara de Nebulização Ciclônica Resfriada por Peltier (PCC), totalmente compatível com os modelos Agilent 7900 e 8900, além dos modelos anteriores de ICP-MS da Agilent. O kit oferece melhor desempenho de enxague (washout) e maior rendimento de em comparação com a câmara de nebulização padrão do tipo Scott.




Para mais informações, visite: www.mixlab.com.br
Entre em contato: vendas@mixlab.com.br

Os benefícios do Design PCC incluem...

Enxague mais rápido

O design exclusivo da câmara de nebulização ciclônica da Glass Expansion reduz significativamente o tempo de enxague ao trabalhar com amostras altamente concentradas e elementos de difícil manejo, como B, Hg, Pb e Sb, em comparação com a câmara de nebulização padrão do tipo Scott.

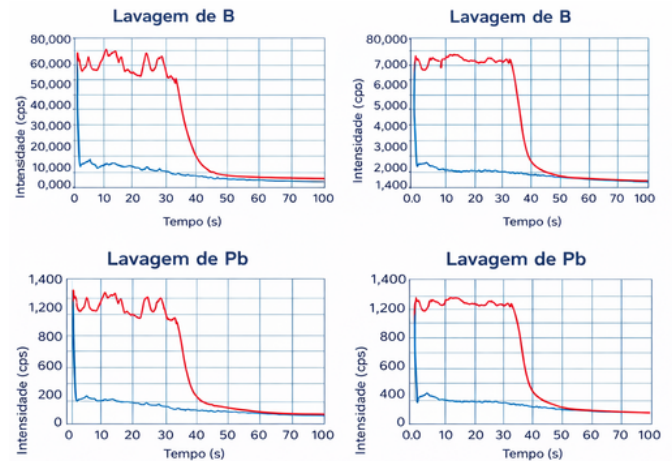

Interface Helix CT

Todas as câmaras de nebulização ciclônicas da Glass Expansion contam com a conexão Helix CT, que proporciona uma vedação consistente e inerte em PTFE contra o nebulizador, impossibilitando o aperto excessivo e garantindo uma vedação hermética, e a instalação ideal do nebulizador.



Câmaras de Nebulização Ciclônicas Intercambiáveis

O Kit PCC permite a fácil intercambialidade entre câmaras de nebulização ciclônicas Helix CT de vidro, quartzo ou PFA.



Instalação Rápida e Simples

O Kit PCC® se conecta diretamente à eletrônica e ao sistema de resfriamento a água já existentes no ICP-MS da Agilent. Um prático suporte de montagem também está incluído, permitindo uma instalação rápida e simples no ICP-MS da Agilent.

